


Silicone Dressing

Silicone Tape

Silicone Foam Dressing

Scar reducing emollient

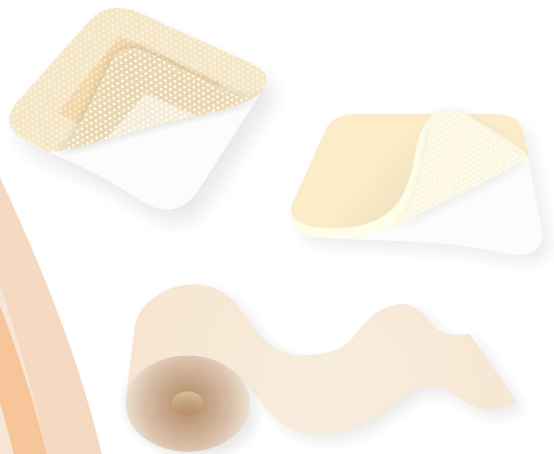

- ◆ We specialize in the research, development and manufacture of general and Advanced Medical Dressings, along with a complete offering of one and Advanced Wound Care Dressings products for patients worldwide.
 - ◆ Our companies and factory are CE & FDA registered, ISO 13485 and ISO 9001 certified.
 - ◆ We currently hold more than 30 national invention patents and intellectual properties.
 - ◆ We are a joint venture company, with offices in the US under the name of "Longterm Medical US", and use the brands "K&P Medical" and "Innomed" internationally. With our creative R&D teams and enhanced technological advantages, we allocate our resources effectively, maintaining strict and comprehensive quality management standards.
 - ◆ Our high quality, comprehensive services and medical/clinical support, our products, our products are designed with one purpose; to improve the quality of life for patients.
-
- ◆ 专业从事医用敷料和伤口系列产品的研发与生产，以供全球患者使用。
 - ◆ 通过CE，FDA，ISO 13485和ISO 9001认证。
 - ◆ 已拥有超过30项的国家发明专利和知识产权。
 - ◆ 公司依托“美国K&P公司”和“Longterm US”强大的研发团队和技术优势，配备先进的生产设备和严格的质量管理程序。
 - ◆ 高品质的产品，全方位的服务及全面的学术支持，简化了医护人员的工作，提高患者的生活质量。



Contents 目录

Silicone Tape 硅凝胶胶带	2
Product Features 产品特征	3
Intended Use 预期用途	4
Silicone Foam Dressing 硅凝胶泡沫敷料	5
Structure illustration of Silicone Foam Dressing 硅凝胶泡沫敷料结构示意图	6
Structure illustration of Silicone Foam Dressing with border 硅凝胶泡沫敷料(薄边型)结构示意图	6
Product Features 产品特征	7
Intended Use 预期用途	7
Cautions 注意事项	7
Scar Reducing Emollient 疤痕贴(减疤贴)	11
Product Features 产品特征	12
Intended Use 预期用途	12
Cautions 注意事项	13


Silicone Tape

硅凝胶胶带

Silicone Tape

Silicone Tape

硅凝胶胶带

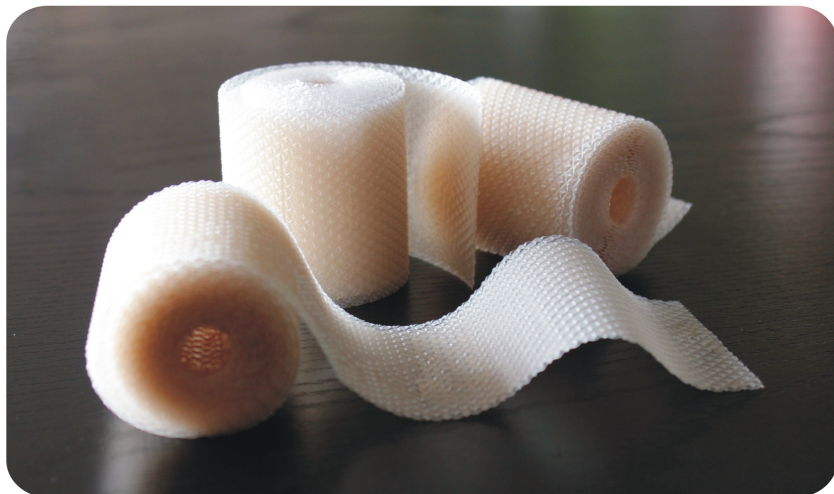


Product Features:

1. Gentle on the skin and painless to remove.
2. Reusable, does not stick to hair and leaves no residue, no remains.
3. Easy to use and hypoallergenic, with good adhesion.
4. Waterproof, but permeable.

产品特征:

1. 温柔粘贴，不损伤皮肤表层，撕除无痛感。
2. 可重复粘贴，不粘毛发，不残留。
3. 使用方便，和皮肤良好贴合，低致敏。
4. 防水，透气。

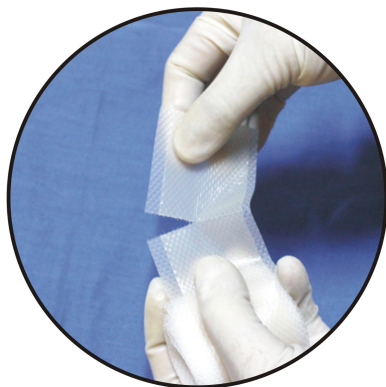


Intended Use:

1. Terrific for use on patients where skin condition is fragile, poor or damaged, such as patients after radiation therapy, chemotherapy, in dialysis or infants.
2. Applicable to a variety of in-dwelling catheters, electrodes, or other external fixation that requires gentle, but robust skin protection and adhesion.

预期用途:

1. 适用于皮肤条件较差，或易损伤皮肤，如放疗、化疗、透析等病人，及新生儿，婴儿等皮肤的外固定。
2. 各种导管类置留针管，电极，敷料等皮肤外固定并提供皮肤保护。

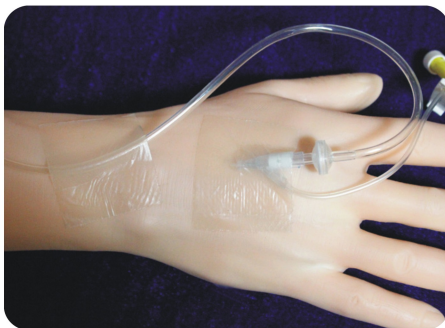

Item No	Description	Pack
S70159	1"x59" (2.5cmx1.5m)	1x10x12
S70259	1.5"x59" (4cmx1.5m)	1x10x12
S70359	3"x59" (7.5cmx1.5m)	1x10x12

Silicone Foam Dressing

硅凝胶泡沫敷料

Silicone
Foam Dressing


Structure illustration of Silicone Foam Dressing

硅凝胶泡沫敷料结构示意图



Structure illustration of Silicone Foam Dressing with border

硅凝胶泡沫敷料(薄边型)结构示意图

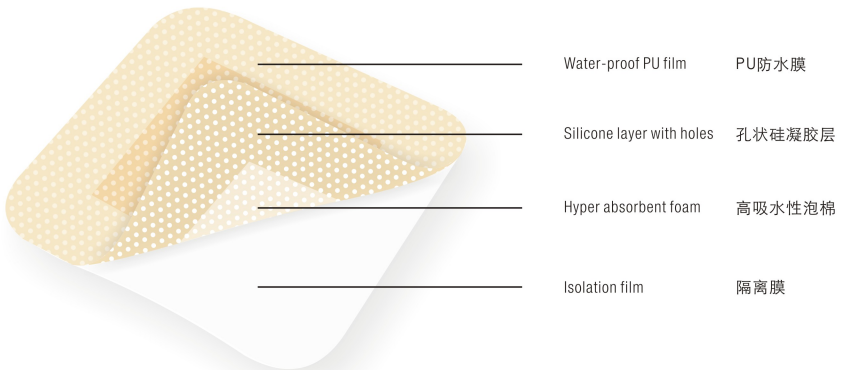

Product Features:

1. Gentle on the skin and painless to remove, with no residue.
2. "Vertically" absorbs wound mucosa exudate, reducing the risk of maceration around the wound.
3. Absorption capacity is great, this dressing keeps the wound under appropriate temperature and humidity according to basic "moist healing" principals.
4. Can be reused after inspection of the wound and will not adhere to the wound bed.
5. Does not damage the new epithelial cells when removed.
6. Helps to reduce scarring.
7. Waterproof, yet permeable. Showering is allowed while using this dressing.
8. Soft and comfortable, with good compression, works as a "cushion".

产品特征:

1. 温柔粘贴，不粘毛发，无残留。
2. 能“垂直”吸收伤口、粘膜渗出液，不扩散，降低伤口周围皮肤浸渍风险。
3. 吸收量大，能保持伤口适当温、湿度，符合“湿性愈合”原理，促进伤口愈合。
4. 可反复粘贴，以便随时复查伤口情况，且不粘连湿性伤口表面。
5. 撕除时不损伤伤口粘膜新生上皮及周围皮肤，无痛感。
6. 可预防创口疤痕的形成。
7. 防水透气，可淋浴。
8. 柔软、舒适及良好的抗压弹性，起“软垫”作用。

Intended use:

1. Applicable to variety of acute and chronic wounds, especially highly exudating wounds.
2. Can be used in the prevention and treatment of various pressure ulcers.

预期用途:

1. 适用于各种急、慢性伤口，特别是渗出液多的伤口。
2. 预防和治疗各种压疮。

Cautions:

1. Coverage should be least 2 cm beyond the edge of the wound.
2. Not for use with oxidizing solutions, such as Hypochlorite solution or Hydrogen peroxide solution (H_2O_2).
3. Discontinue use if the patient is allergic to silicone.

注意事项:

1. 使用时至少超出伤口边缘2cm覆盖。
2. 不能与氧化剂同时使用，如次氯酸溶液和过氧化氢溶液（H₂O₂）。
3. 对硅胶皮肤过敏者慎用。

Silicone Foam Dressing

硅凝胶泡沫敷料



Item No	Description	Pack
S71022	2"x2" (5cmx5cm)	1x20x10
S71033	3"x3" (7.5cmx7.5cm)	1x20x10
S71044	4"x4" (10cmx10cm)	1x20x10
S71055	5"x5" (12.5cmx12.5cm)	1x20x10
S71066	6"x6" (15cmx15cm)	1x10x5
S71068	6"x8" (15cmx20cm)	1x10x5

Silicone Foam Dressing (Pediatric Head)

硅凝胶泡沫敷料 (小儿枕部)



Item No	Description	Pack
S71144	4"x4" (10cmx10cm)	1x10x5

Silicone Foam Dressing 硅凝胶泡沫敷料

Silicone Foam Dressing (Adult Head)


硅凝胶泡沫敷料 (成人枕部)



Item No	Description	Pack
S71166	6"x6" (15cmx15cm)	1x10x5

Silicone Foam Dressing (Heel and elbow)


硅凝胶泡沫敷料 (足跟及肘关节)

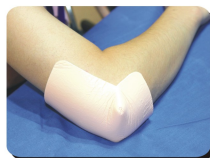

Item No	Description	Pack
S71047	4"x7" (10cmx17.5cm)	1x10x5

Silicone Foam Dressing (Sacrococcygeal)

硅凝胶泡沫敷料 (骶尾部)

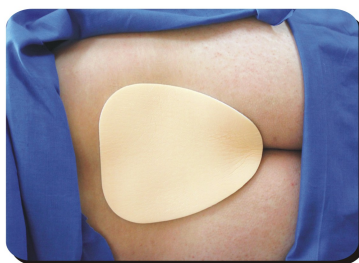

Item No	Description	Pack
S71067	6"x7-1/8" (15cmx18cm)	1x10x5

Silicone Foam Dressing (Shoulder Blade)


硅凝胶泡沫敷料 (肩胛骨)



Item No	Description	Pack
S71058	5-1/2"x8-3/8" (14cmx21cm)	1x10x5

Silicone Foam Dressing with border

硅凝胶泡沫敷料 (薄边型)

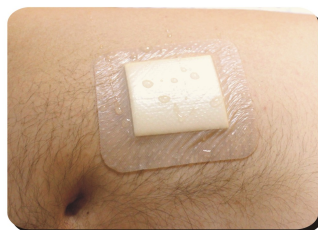

Item No	Description	Pack
S72033	3"x3" (7.5cmx7.5cm)	1x20x10
S72044	4"x4" (10cmx10cm)	1x20x10
S72055	5"x5" (12.5cmx12.5cm)	1x20x10
S72066	6"x6" (15cmx15cm)	1x10x5
S72068	6"x8" (15cmx20cm)	1x10x5

Scar Reducing Emollient

疤痕贴（减疤贴）

Scar
Reducing Emollient

Scar Reducing Emollient

疤痕贴（减疤贴）

Product Features:

1. Effectively prevents the formation of scar
2. Softens the initial stage of scars and prevents further hyperplasia.
3. Washable and reusable.
4. Better effects against scarring with 3 months continuous use.
5. Can be cut-to-fit.

产品特点：

1. 可有效预防疤痕的形成。
2. 可软化已形成的初期疤痕，阻止疤痕进一步的增生。
3. 可反复粘贴，可清洗。
4. 连续使用3个月效果更佳。
5. 可按需裁剪使用。

Intended Use:

1. For all early stage wounds to help prevent scar formation.
2. Use on initial stages of wound tissue to soften scars and prevent further hyperplasia.

预期用途：

1. 适用于各种创口完全愈合初期，防止疤痕的形成。
2. 适用于疤痕形成早期（红色隆起疤痕），可软化疤痕及阻止疤痕的进一步增生。



1. Scar formation of early stage.
疤痕形成初期。



2. Paste the scar reducing emollient dressing on the wound.
将疤痕贴在创口处。



3. After three months ,the scar will heal without scar mark.
三个月后创口愈合且不留疤痕。

Scar Reducing Emollient 疤痕贴（减疤贴）

Caution:

1. Clean the skin and dressing once a day with warm water or neutral detergent.
2. Not for use with oxidizing solutions, such as Hypochlorite solution or Hydrogen peroxide solution (H_2O_2). Allow to air dry after cleaning.
3. Not for use on healed wounds.
4. First treatment should be between 2-4 hours, increasing by 4 hours daily, until 24 hour usage is attained, then use daily all day.
5. Discontinue use if the patient is allergic to silicone.

注意事项:

1. 每天用温水或中性清洁剂清洗敷料及皮肤一次。
2. 不可用氧化剂类清洗液，如次氯酸溶液和过氧化氢溶液（ H_2O_2 ）。清洗后自然晾干备用。
3. 不可用于尚未完全愈合的伤口。
4. 24小时连续使用效果更佳。但开始使用后，第一天建议使用2-4小时，以后每天增加4小时。
5. 对硅胶皮肤过敏者慎用。

Item No	Description	Pack
S73002	3/4"x2-3/4" (2cmx12cm)	1 pcs/box
S73012	1-1/2"x2-3/4" (4cmx12cm)	1 pcs/box
S73022	2-3/8"x2-3/4" (6cmx12cm)	1 pcs/box

Silicone Tape
Silicone Foam Dressing
Scar Reducing Emollient

硅凝胶胶带
硅凝胶泡沫敷料
疤痕贴（减疤贴）

